


Embryo transfer

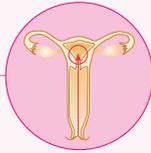


TRANSFER SLOW

Catetere per trasferimento di embrioni con introduttore (senza siringa)

Embryo transfer set with introducer (without syringe)

Catetere Inaudi - Inaudi Catheter

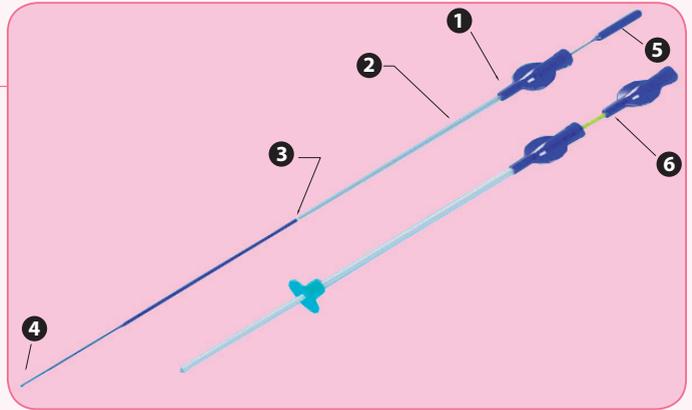

Indicato per il prelievo e trasferimento di embrioni nella cavità uterina posti in modo particolarmente delicato e atraumatico per gli embrioni.

Il catetere è composto da:

- Raccordo femmina che funge da impugnatura (1);
- Tubo prossimale rigido centimetrato (2);
- Tubo mediano semirigido centimetrato e trasparente, per una miglior visione durante la fase di posizionamento degli embrioni (3);
- Tubo distale trasparente e morbido per un inserimento atraumatico nella cavità uterina (4);
- Centimetratura e riga radiopaca estesa su tutto il catetere;
- Mandrino centimetrato che agisce da micropistone (5), che permette di aspirare lentamente e dolcemente gli embrioni attraverso il condotto mediano;
- Blocco del mandrino per evitare il rischio di perdita degli embrioni aspirati.

Questo set comprende anche un **CATETERE GUIDA (6)** che facilita l'inserimento del catetere di trasferimento, che è dotato di fermo scorrevole e di una scala di misurazione posta dalla punta.

La configurazione del catetere esclude l'utilizzo della siringa come elemento aspiratore/propulsore. Si evita quindi il rischio di una eccessiva pressione e turbolenza che, soprattutto in fase di espulsione, può rendere la procedura fortemente traumatizzante per gli embrioni.

For loading and transferring the embryos into the uterine cavity in a very gentle and atraumatic way.

The catheter is composed by:

- Female connector serving as finger-grip (1);
- Rigid, centimeter-marked proximal portion (2);
- Semi-rigid & transparent centimeter-marked medial portion, to enhance visualization during embryo positioning (3);
- Soft & transparent distal portion for atraumatic penetration into the uterine cavity (4);
- Centimeter-markings and radiopaque line placed all along the catheter
- Centimeter-marked stylet acting as a microplunger grants a very slow & gentle embryo aspiration through the medial portion (5);
- Stylet/microplunger blockage to avoid the risk of embryo loss .

This set includes also a **GUIDING CATHETER (6)** that facilitates the insertion of transfer catheter. It is provided with a sliding cursor and with a centimeter markings on the tip.

This system avoids the use of the syringe during embryo aspiration/expulsion phases. This largely excludes the risk of excessive pressure and turbulence to the embryos particularly during expulsion phase and makes the procedure definitely less traumatic.

Scatola da 12 pezzi. Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a raggi Beta e marcato CE.

12 pcs. per box.

Single packaged, single use, Beta sterilized and CE marked.

Cod.	Descrizione - Description
770250	Ø porzione distale morbida 1,33 mm (4 Fr) soft distal portion O.D. 1.33 mm (4 Fr) lung. totale 260 mm - total length 260 mm